



義大醫療 2026 年 08 月份床邊檢驗血糖機品管評估結果說明
(機型:FORD S10)
(試片批號: TD24J108-BED、TD25H129-BDD)

1. 各單位機台品管操作次數及執行成功率請詳見後表所示。
2. 全院血糖試片品管統計圖表、平均值(Mean)、標準差(SD)、變異係數(CV)請詳見後表所示。
3. 8 月份有 **1** 個單位品管執行成功率<90%
 - (1) **家醫科居家訪視**，經檢視當月品管執行 9 次，其中 1 次失敗，品管執行成功率為 **88.89%**。
 - 3.1 **家醫科居家訪視**單位使用率較低，品管執行數量少，容易導致失敗率偏高，下個月將持續觀察。
 - 3.2 其餘單位確實執行血糖機品管，品管執行成功率皆>90%。
4. 本月份統計單位共有 **69** 個，評估結果經審核後上傳，相關教育訓練及品管執行注意事項請逕行參閱醫學檢驗部網頁，網址為 <http://exdep.edah.org.tw/cp/>。

部長		技術主任	  	審核人員	
----	---	------	--	------	---

全院品管統計表

查詢日期區間：2026/08/01 ~ 2026/08/31

編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
1	A0000001	化療中心	20	20	0	100.00	0.00
2	A0000002	日間病房	7	7	0	100.00	0.00
3	A0000004	居家護理	64	64	0	100.00	0.00
4	A0000006	美容中心	6	6	0	100.00	0.00
5	A0000008	家醫科(偏鄉)	4	4	0	100.00	0.00
6	A0000009	家醫科居家訪視	9	8	1	88.89	11.11
7	A0000010	核醫科	21	20	1	95.24	4.76
8	A0000011	健診	26	26	0	100.00	0.00
9	A0000012	產房	16	16	0	100.00	0.00
10	A0000013	麻醉科	48	47	1	97.92	2.08
11	A0000017	職業醫學科	4	4	0	100.00	0.00
12	A000005A	5A病房	7	7	0	100.00	0.00
13	A000005B	5B病房	30	30	0	100.00	0.00
14	A000006A	6A病房	64	62	2	96.88	3.13
15	A000006B	6B病房	62	62	0	100.00	0.00
16	A000007A	7A病房	66	62	4	93.94	6.06
17	A000007B	7B病房	66	62	4	93.94	6.06
18	A000008A	8A病房	67	64	3	95.52	4.48
19	A000008B	8B病房	65	63	2	96.92	3.08
20	A000009A	9A病房	63	62	1	98.41	1.59
21	A000009B	9B病房	59	58	1	98.31	1.69
22	A00000ER	急診	187	184	3	98.40	1.60
23	A000010A	10A病房	54	54	0	100.00	0.00
24	A000011A	11A病房	61	60	1	98.36	1.64
25	A000011B	11B病房	63	59	4	93.65	6.35
26	A000012A	12A病房	63	62	1	98.41	1.59
27	A000012B	12B病房	94	93	1	98.94	1.06
28	A000013A	13A病房	94	94	0	100.00	0.00
29	A000013B	13B病房	63	63	0	100.00	0.00
30	A0000CCU	CCU	63	61	2	96.83	3.17

全院品管統計表

查詢日期區間：2026/08/01 ~ 2026/08/31

編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
31	A0000HDR	HDR	75	75	0	100.00	0.00
32	A0000IMU	IMU	32	31	1	96.88	3.13
33	A0000RCC	RCC	58	56	2	96.55	3.45
34	A000MICU	MICU	61	59	2	96.72	3.28
35	A000PICU	PICU	81	81	0	100.00	0.00
36	A00NSICU	NSICU	63	62	1	98.41	1.59
37	A00SICU1	SICU	62	62	0	100.00	0.00
38	A00SICU2	SICU-2	57	56	1	98.25	1.75
總計			2,005	1,966	39	98.05	1.95

註：所有的統計數值皆是以設定為有效的品管資料為主；若同組品管資料中有一筆被設為無效，則整組資料皆會被排除

全院品管統計表

查詢日期區間：2026/08/01 ~ 2026/08/31

編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
1	C0000002	癌-高壓氧中心	16	16	0	100.00	0.00
2	C0000003	癌-透析室	25	25	0	100.00	0.00
3	C0000004	癌-麻醉科	1	1	0	100.00	0.00
4	C0000006	癌-護理之家	94	92	2	97.87	2.13
5	C000005C	癌-5C	30	30	0	100.00	0.00
6	C000005D	癌-5D	30	30	0	100.00	0.00
7	C000006C1	癌-6C	66	66	0	100.00	0.00
8	C000006D	癌-6D	66	61	5	92.42	7.58
9	C000007C	癌-7C	62	62	0	100.00	0.00
10	C000007D	癌-7D	66	62	4	93.94	6.06
11	C000008C	癌-8C	65	64	1	98.46	1.54
12	C000008D	癌-8D	62	62	0	100.00	0.00
13	C00000ER	癌-急診	61	61	0	100.00	0.00
14	C003LICU1	癌-3LICU	65	64	1	98.46	1.54
15	D0000001	大昌-麻醉科	3	3	0	100.00	0.00
16	D0000002	大昌-糖尿病衛教室	11	11	0	100.00	0.00
17	D0000003	大昌-嬰兒室	31	30	1	96.77	3.23
18	D0000004	大昌-護理科(董事長)	3	3	0	100.00	0.00
19	D0000010H	大昌-10H	33	32	1	96.97	3.03
20	D000005G	大昌-5G	32	31	1	96.88	3.13
21	D000006G	大昌-6G	62	62	0	100.00	0.00
22	D000008J	大昌-8J	32	31	1	96.88	3.13
23	D000009G	大昌-9G	62	62	0	100.00	0.00
24	D000009H	大昌-9H	65	63	2	96.92	3.08
25	D00000ER	大昌-急診	62	62	0	100.00	0.00
26	D0000HDR	大昌-HDR	19	19	0	100.00	0.00
27	D0000IMU	大昌-IMU	33	32	1	96.97	3.03
28	D0000PD2	大昌-OPD(2)	25	24	1	96.00	4.00
29	D00B1OPD	大昌-B1門診	54	53	1	98.15	1.85
	總計		1,236	1,214	22	98.22	1.78

列印時間：2026/09/15 11:43

全院品管統計表

查詢日期區間：2026/08/01 ~ 2026/08/31


編號	單位代碼	單位名稱	QC 總組數	QC 成功組數	QC 失敗組數	執行成功率(%)	失敗率(%)
1	A0000PD1	義大醫院門診	208	203	5	97.60	2.40
2	C0000PD1	癌醫-門診	109	106	3	97.25	2.75
總計			317	309	8	97.48	2.52

註：所有的統計數值皆是以設定為有效的品管資料為主；若同組品管資料中有一筆被設為無效，則整組資料皆會被排除


(美下)
試片品管統計圖表

查詢年月：2026/08

批號試片碼：TD24J108-BED

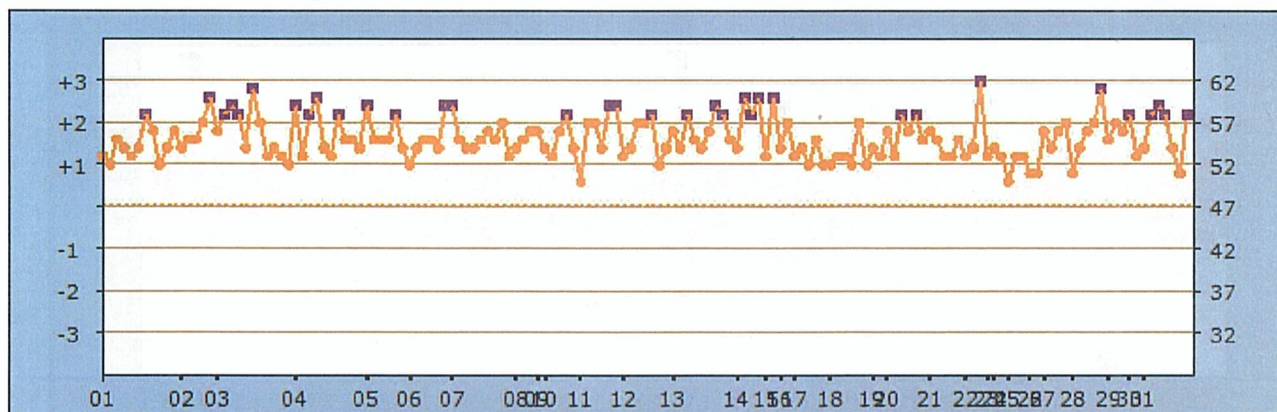

Level1			
Lot Num :	TD24J108-BED		
N=	153		
	Record	Target	
Mean :	55.25	47	
SD :	2.47	5	
CV% :	4.47		
Bias(%) :	17.55		
Low :	50	High :	62

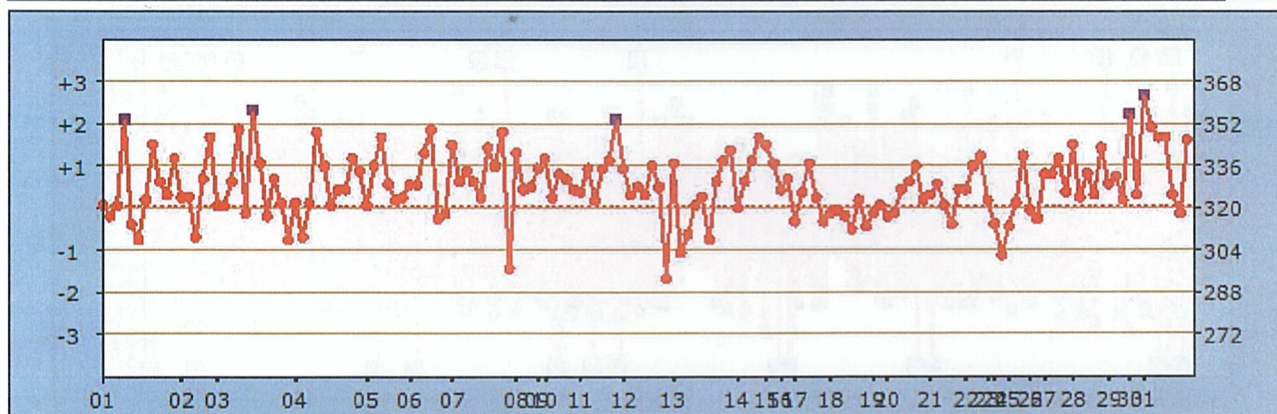


Level3			
Lot Num :	TD24J108-BED		
N=	153		
	Record	Target	
Mean :	328.57	320	
SD :	12.26	16	
CV% :	3.73		
Bias(%) :	2.68		
Low :	293	High :	363


試片品管統計圖表

查詢年月：2026/08

批號試片碼：TD25H129-BDD

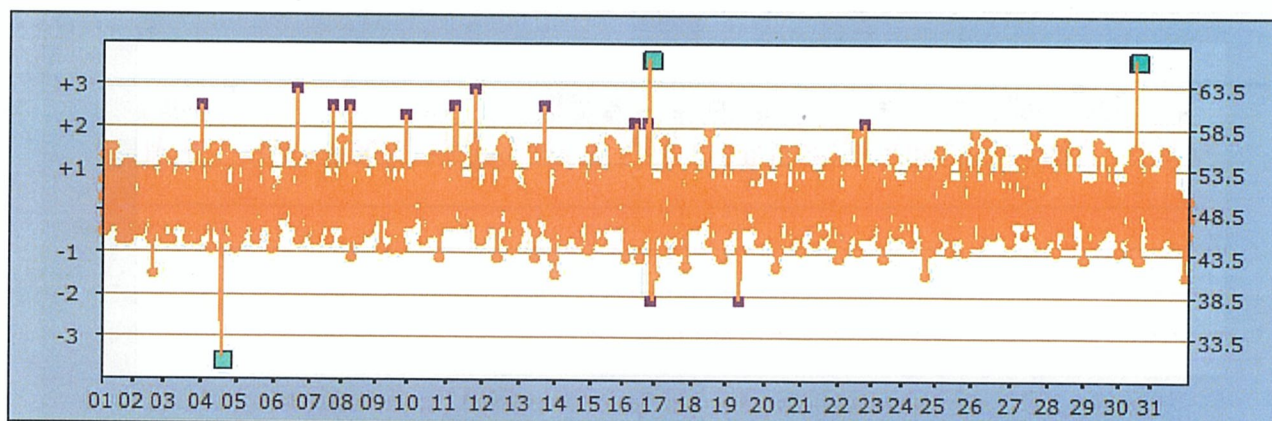

Level1			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	1867		
	Record	Target	
Mean :	50.17	48.5	
SD :	12.07	5	
CV% :	24.06		
Bias(%) :	3.44		
Low :	17	High :	322

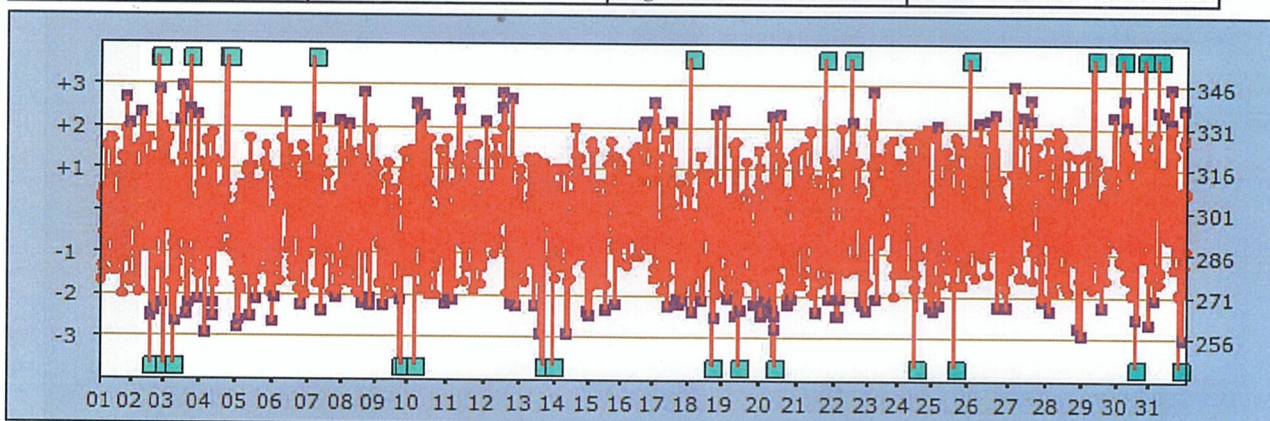


Level3			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	1845		
	Record	Target	
Mean :	298.69	301	
SD :	23.16	15	
CV% :	7.75		
Bias(%) :	0.77		
Low :	0	High :	650

(癌區+大昌).
試片品管統計圖表


列印時間：2026/09/15 11:42

查詢年月：2026/08

批號試片碼：TD24J108-BED

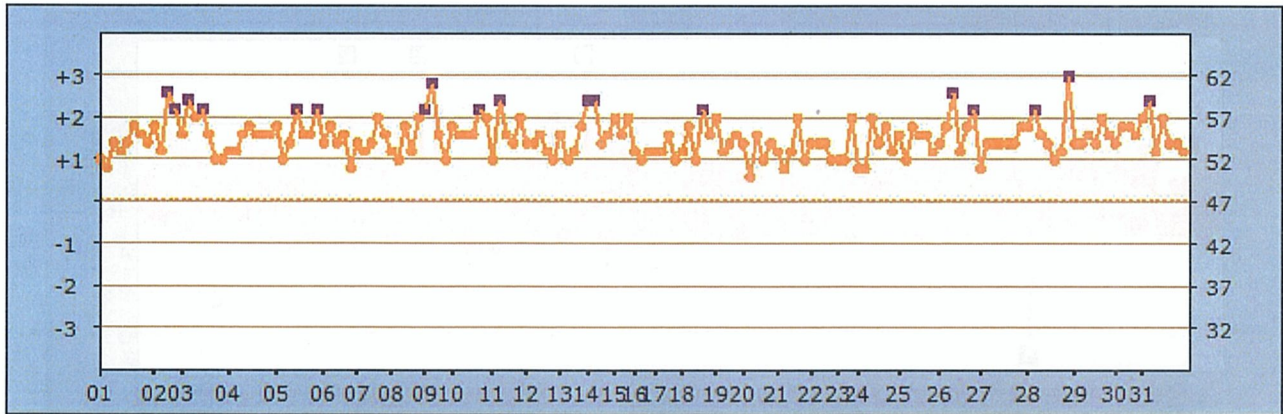

Level1			
Lot Num :	TD24J108-BED		
N=	161		
	Record	Target	
Mean :	54.7	47	
SD :	2.19	5	
CV% :	4		
Bias(%) :	16.38		
Low :	50	High :	62

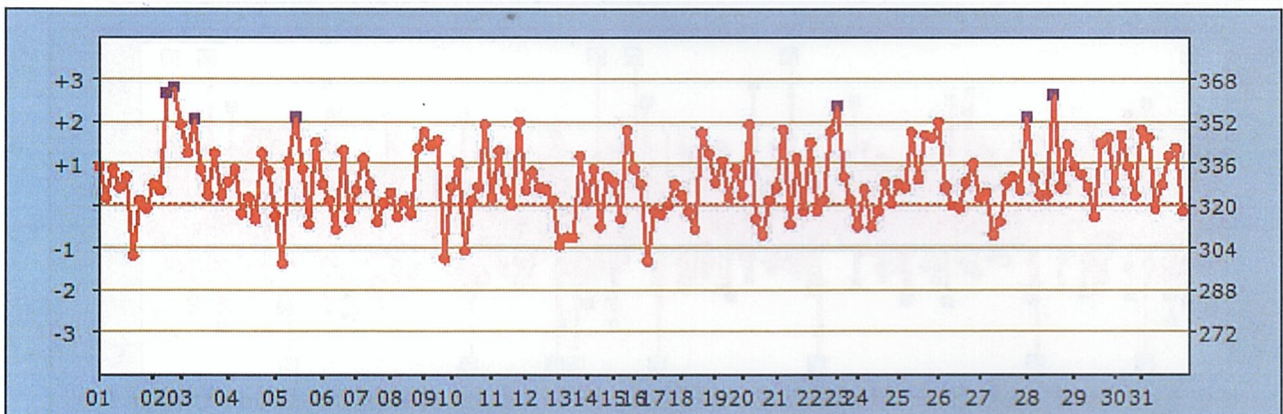


Level3			
Lot Num :	TD24J108-BED		
N=	161		
	Record	Target	
Mean :	329.08	320	
SD :	13.51	16	
CV% :	4.11		
Bias(%) :	2.84		
Low :	298	High :	365


試片品管統計圖表

查詢年月：2026/08

批號試片碼：TD25H129-BDD

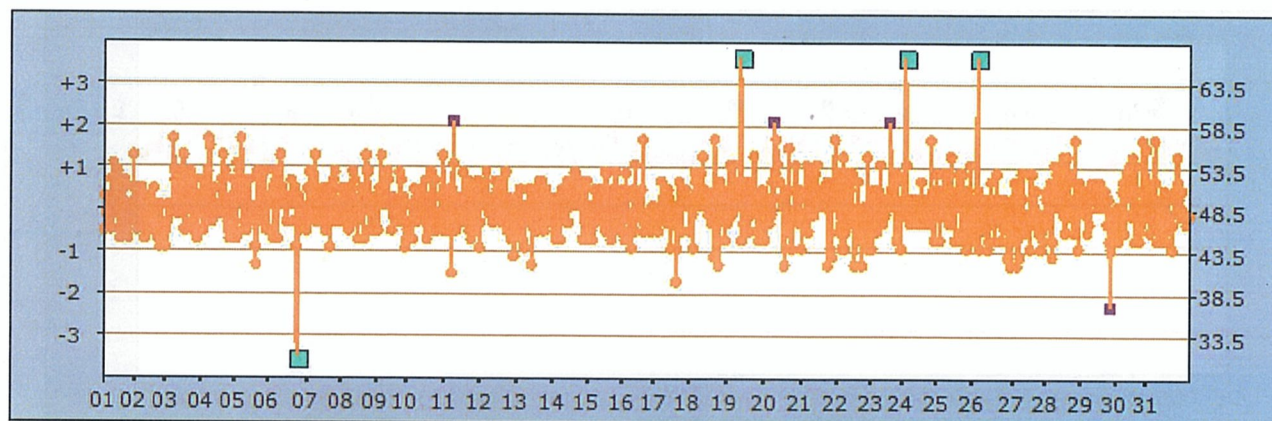

Level1			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	1075		
	Record	Target	
Mean :	48.92	48.5	
SD :	3.85	5	
CV% :	7.87		
Bias(%) :	0.87		
Low :	0	High :	76

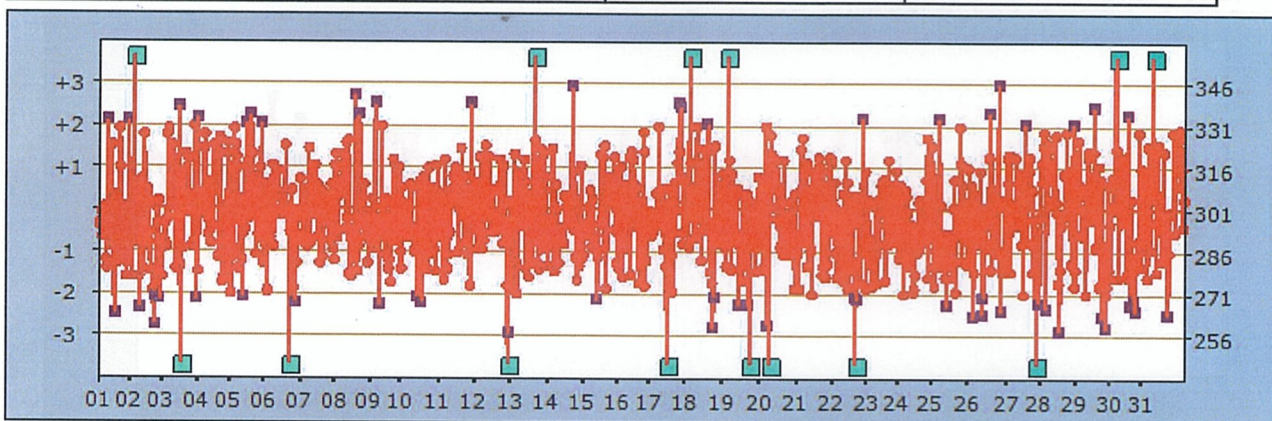

Level3			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	1069		
	Record	Target	
Mean :	298.23	301	
SD :	23.37	15	
CV% :	7.84		
Bias(%) :	0.92		
Low :	0	High :	396

(義大門診+癌區門診)
試片品管統計圖表


列印時間：2026/09/15 11:44

查詢年月：2026/08

批號試片碼：TD24J108-BED



Level1			
Lot Num :	TD24J108-BED		
N=	73		
	Record	Target	
Mean :	55.82	47	
SD :	6.19	5	
CV% :	11.09		
Bias(%) :	18.77		
Low :	19	High :	90

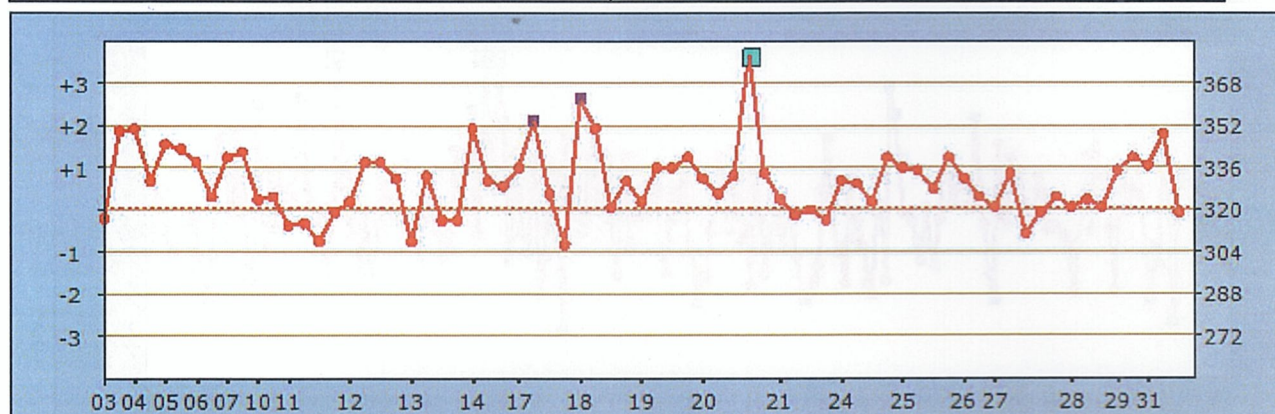


Level3			
Lot Num :	TD24J108-BED		
N=	71		
	Record	Target	
Mean :	330.61	320	
SD :	12.61	16	
CV% :	3.81		
Bias(%) :	3.32		
Low :	307	High :	369


試片品管統計圖表

查詢年月：2026/08

批號試片碼：TD25H129-BDD

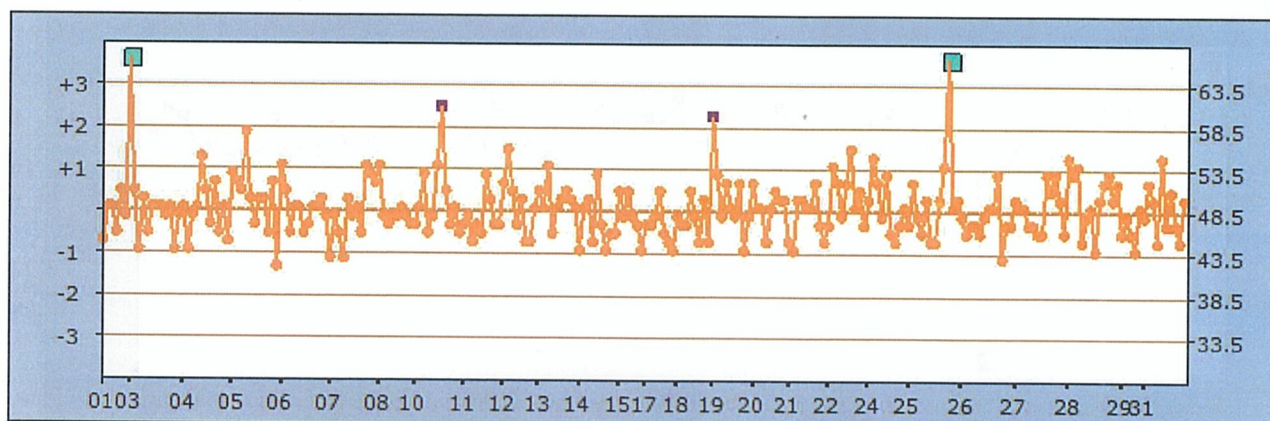

Level1			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	244		
	Record	Target	
Mean :	49.11	48.5	
SD :	4.64	5	
CV% :	9.45		
Bias(%) :	1.26		
Low :	42	High :	91

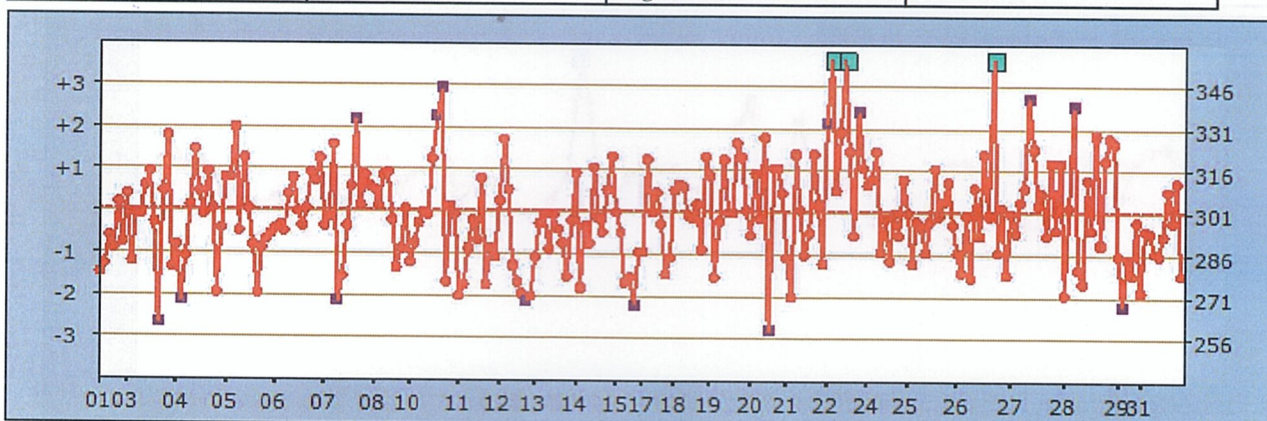

Level3			
Lot Num :	TD25H129-BDD		
N=	242		
	Record	Target	
Mean :	300.49	301	
SD :	18.61	15	
CV% :	6.19		
Bias(%) :	0.17		
Low :	259	High :	392