

# 檢驗條碼張貼須知

義大醫療 醫學檢驗部 / 檢驗科

V.202311

# 大綱

- ▶ 檢驗條碼介紹
- ▶ 檢體動向監控程式
- ▶ 檢驗條碼黏貼須知
- ▶ 採檢管(容器)黏貼示範教學
- ▶ 檢體補單(追加檢驗)流程
- ▶ 人工(非氣送系統)送檢流程

# 檢驗條碼介紹

SID(院區+年+月+日+4碼流水號)：(四刷)刷條碼用

The image shows a patient information label with a barcode and various fields. Red boxes with lines pointing to specific parts of the label identify the following information:

- 列印日期**: 109.08.19
- 來源別**: A908190251
- 病歷號**: 0138900
- 採檢容器**: 肝素管1mL
- 特殊備註**: Lactate, 冰浴, 抽血3mL
- 檢體別**: Blood
- 工作號**: 00107
- 床號**: 3D07
- 生日**: 043-04-30
- 姓名**: 林依琳

# 檢體動向監控程式

院	Sid	列印條碼	時間	採檢登錄	時間	送檢登錄	時間	收檢登錄	時間	檢體上機	時間	開立醫囑	時間
16					00:54								00:47
13													
18					00:03								00:32
187	002708	102-08-11	00:09	102-08-11	00:14	102-08-11	00:28	102-08-11	00:28			102-08-11	00:07


開立醫囑

列印條碼

採檢登錄

送檢登錄

收檢登錄

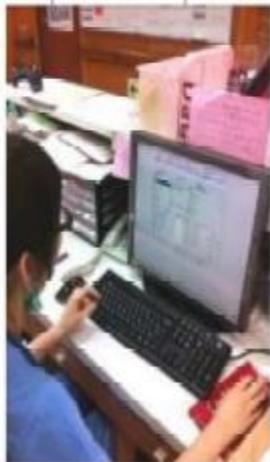

病人手圈條碼


採檢者識別證

檢體條碼




# 檢驗條碼黏貼須知

- ▶ 以直立方式張貼，**條碼區在右側**，**文字區在左側**
- ▶ 須張貼於檢體本身，勿張貼於其他容器或外袋上  
(如冰浴杯子、夾鏈袋...等)

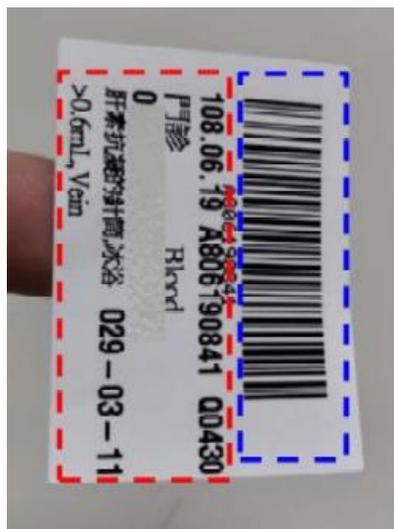

檢驗條碼黏貼方式-紫、黃、綠頭  
以條碼在右文字在左的方式黏貼  
從採檢管標籤處開始黏貼，勿貼太低

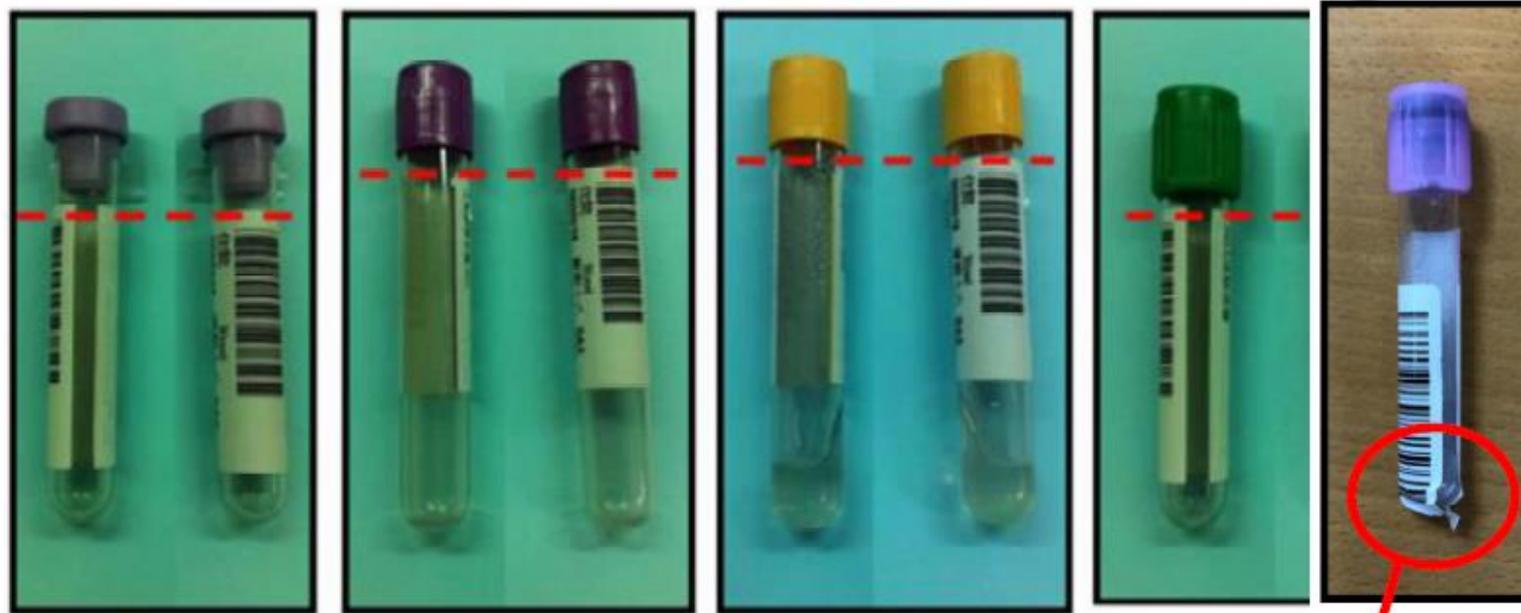

條碼貼太低

# 檢驗條碼黏貼方式-藍頭

以條碼在右文字在左的方式黏貼

從採檢管標籤處開始黏貼，環繞後露出空白處




# 檢驗條碼黏貼方式-血瓶

以條碼在右文字在左的方式黏貼  
黏貼於瓶身上無條碼處



條碼需縱向黏貼

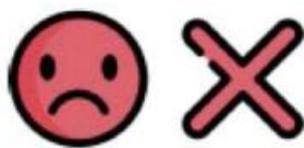


勿橫向黏貼



勿蓋住瓶身條碼


# 檢驗條碼黏貼方式-gas針筒

條碼貼於採檢管身環繞後對貼，條碼區域需平整

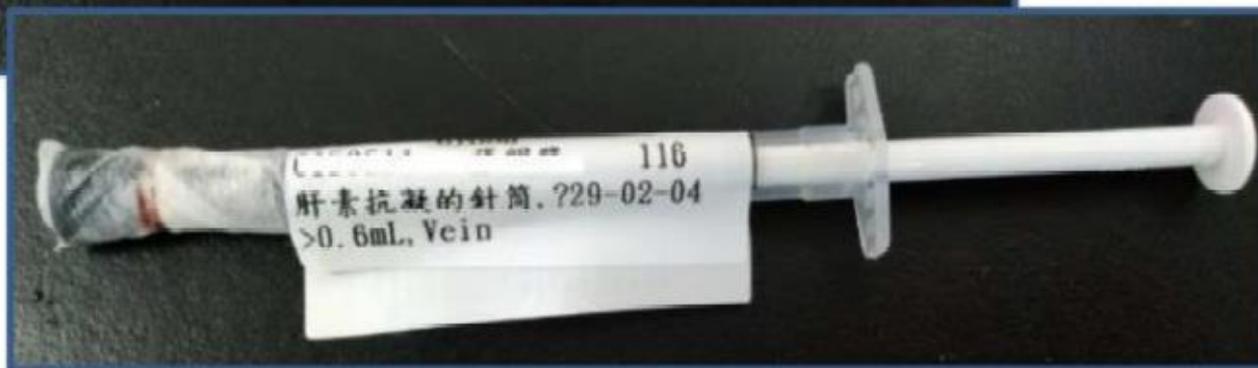

# 檢驗條碼黏貼方式-紅蓋尿管

以條碼在右文字在左的方式黏貼

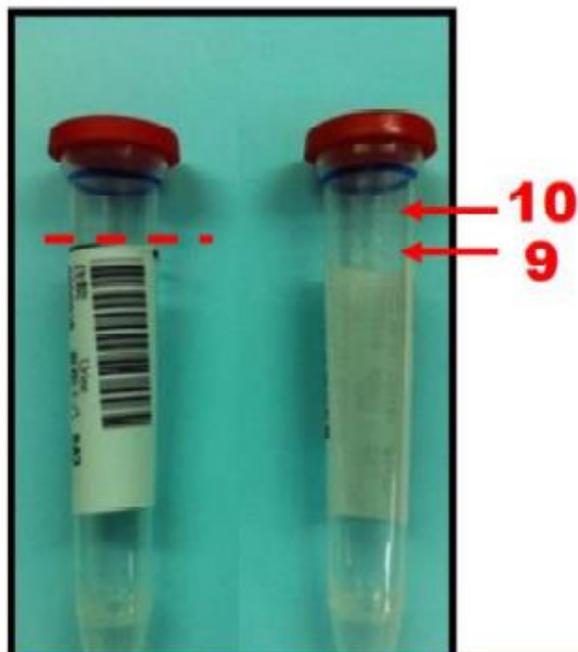

尿液標準化試管(U1紅蓋尿管)  
請從尿管刻度9~10之間黏貼  
檢驗條碼

# 檢驗條碼黏貼方式-糞便檢查瓶

以條碼在右文字在左的方式黏貼





# 檢驗條碼黏貼方式- 蟯蟲膠片

貼於膠片**原本紙袋**上，勿貼於夾鏈袋上



檢驗條碼黏貼方式-病毒傳送管  
以條碼在右文字在左的方式黏貼  
從蓋子到瓶身，環繞檢體黏貼

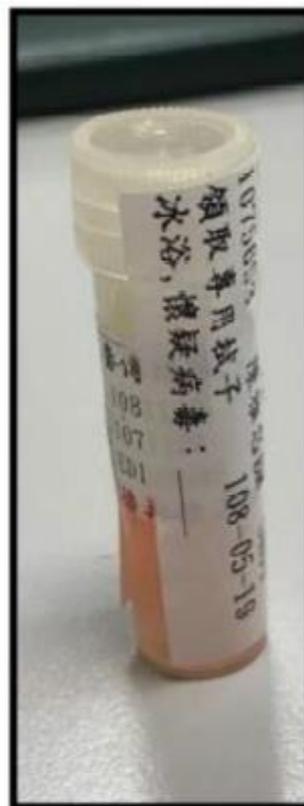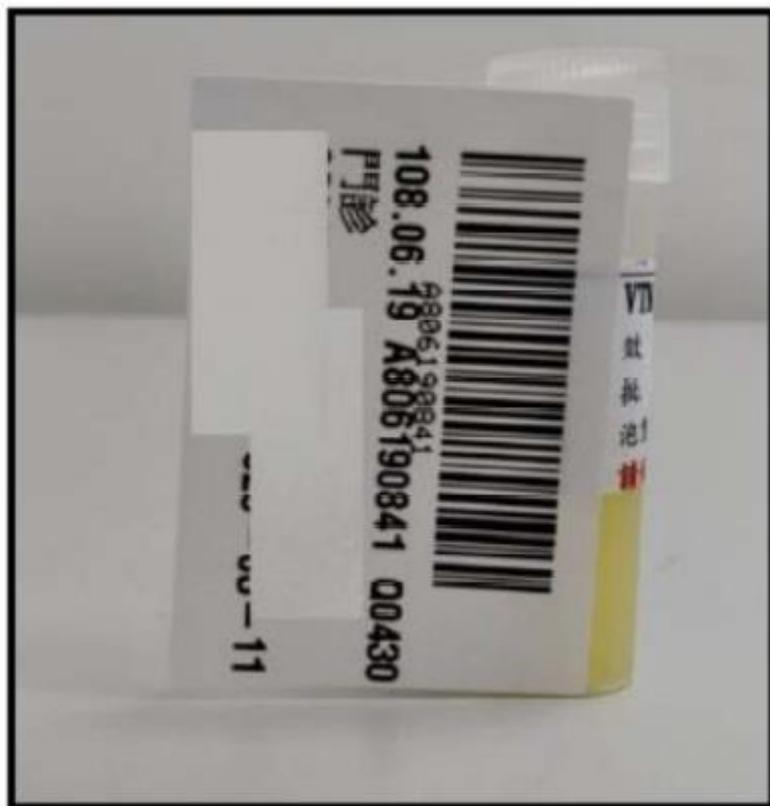

# 檢驗條碼黏貼方式-流感快篩拭子

貼於拭子**原本封套**上，勿貼於夾鏈袋上



# 補單(追加檢驗)流程— 需要補單，而不重採檢體時

- ▶ 4小時內的血液檢體，與2小時內的尿液檢體可接受補單
- ▶ 血液檢體之Alcohol、Glucose冰浴、避光、立即處理的項目不可補單
- ▶ 侵入性檢體，如體液檢體可接受補單，將於報告註記採檢時間
- ▶ 其他檢體可電話詢問檢驗部是否可補單
- ▶ 補單送檢時，需將條碼放入補單盒或夾鏈袋，再氣送至醫學檢驗部/檢驗科

補單的Barcode需放入補單盒或夾鏈袋避免弄丟



未放入補單盒或夾鏈袋內易弄丟



# 人工(非氣送系統)送檢流程

- ▶ **冰浴檢體、玻璃採檢容器**無法以氣送系統傳送
- ▶ 傳送人員(護佐)或護理人員將檢體拿到單位氣送系統前的條碼機「刷出」(電腦紀錄檢體送出時間)
- ▶ 檢體送至醫學檢驗部/檢驗科

