


使用優泌樂筆 Humalog Mix50[®]之正確步驟

 <p>1</p> <p>備藥</p>	<p>器材準備 注射前先將優泌樂筆[®]、酒精棉片及針頭準備好。</p>
 <p>2</p>  <p>3</p> <p>振搖</p>	<p>振搖諾和筆並消毒注射針頭 注射前，將優泌樂筆<u>小力滾動 10 次</u>，<u>再上下擺動 10 次</u>，直到胰島素呈現均勻霧狀。 撕開酒精棉片，消毒優泌樂筆[®]橡皮頂端部分。</p>
 <p>4</p> <p>裝針</p>	<p>裝置針頭 針頭保護片撕掉，垂直插入頂優泌樂筆端，順時針旋轉到底。 取下針頭外蓋收好備用，移除針頭內蓋。</p>
 <p>5</p>  <p>6</p> <p>試注排空氣</p>	<p>排除空氣 將劑量設定鈕轉至 <u>2 單位</u>，將注射筆朝上 輕拍筆式小管卡夾匣套，使空氣集中頂端，再將針頭朝上，按壓注射鈕，排氣動作即完成。</p>
 <p>7</p> <p>劑量旋鈕</p> <p>旋轉劑量</p>	<p>劑量設定 轉動劑量旋鈕至您需要注射的單位數量。</p>

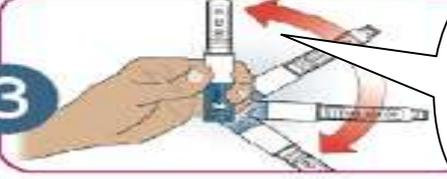

【注意事項】

1. 當調錯劑量，可以相反方向調回正確劑量。
2. 當藥水匣內的劑量不足時，劑量射錠鈕則無法轉到需要的劑量，例如：需要 20 單位的劑量，而藥水只剩下 12 單位，則劑量設定鈕只能轉至 12 單位。
3. 未使用的優泌樂筆[®]需冷藏，開封使用後，不需冷藏。請存放在 30°C 以下環境，使用中的保存期可達 4 週。
4. 優泌樂筆僅能皮下注射，不建議靜脈注射，注射部位要更換，同一部位每月注射不可超過一次。
5. 注射後請勿按摩注射部位。
6. 每次注射需要使用新針頭，而注射後的針頭應丟棄於不透的容器內。
7. 若發現有結塊或白色固體顆粒黏著在筆式小管底或管壁就不建議再繼續使用。

使用優泌樂筆[®]常見之 Q&A

問 1：優泌樂筆建議施打在哪些部位？

答 1：建議以皮下注射的方式給藥，建議施打的部位有腹部、臀部、大腿前側以及手臂

問 2：施打優泌樂筆[®]有沒有什麼副作用？

答 2：優泌樂筆[®]常見的不良反應包括局部過敏反應：包括注射部位紅、腫與癢，這種輕微反應可能數天或數週就會消失，其他不良反應包括低血糖、水腫以及注射部位脂肪堆積。

問 3：我要怎麼儲存這個藥品？

答 3：未開封之胰島素冷藏（2~8°C）可存放至外包裝上有效期限；開封後，於室溫（低於 30°C）下可貯存放 4 個星期。

問 4：懷孕與哺乳婦可以使用優泌樂筆[®]嗎？

答 4：懷孕婦女可以使用。哺乳婦接受胰臟素的治療對嬰兒並無危險性，但是優泌樂筆的劑量需要調整。